


AeroChamber Plus Z STAT™

Anti-Static Valved Holding Chamber

MOUTHPIECE
LARGE MASK

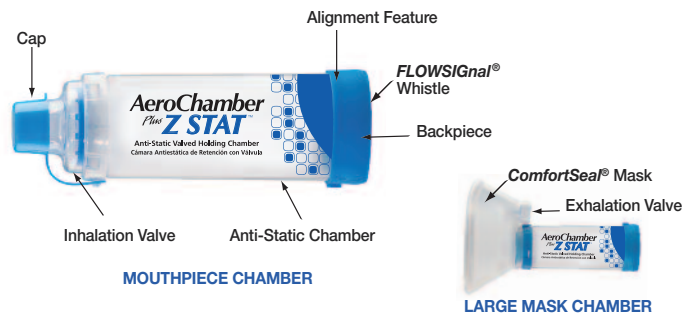

INDICATIONS FOR USE

This product is intended to be used by patients who are under the care or treatment of a physician or licensed healthcare professional. The device is intended to be used by these patients to administer aerosolized medication from most pressurized Metered Dose Inhalers. The intended environments for use include the home, hospitals and clinics.

INSTRUCTIONS FOR USE

THIS PRODUCT CAN BE USED RIGHT OUT OF PACKAGE. BEFORE USE, ENSURE THESE INSTRUCTIONS AND THE INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH THE METERED DOSE INHALER (MDI) HAVE BEEN READ.

MOUTHPIECE

LARGE MASK

1		2		3		4		5		6		7	
	Carefully examine the product for damage, missing parts or foreign objects. Remove any foreign objects prior to use. The product should be replaced IMMEDIATELY if there are any damaged or missing parts. If necessary, use the Metered Dose Inhaler (MDI) alone until a replacement is obtained. If the patient's symptoms worsen, please seek immediate medical attention.	Remove cap(s) from the MDI and chamber (if applicable).	Shake the MDI immediately before each use as per the instructions supplied with the MDI.	Insert the MDI into the backpiece of the chamber.	Put mouthpiece into mouth and close lips around it to ensure an effective seal.	Apply mask to face and ensure an effective seal.	Breathe out gently and depress the MDI at the beginning of a slow inhalation. Breathe in slowly and deeply through the mouth until a full breath has been taken. Hold breath for 5 – 10 seconds, if possible. Otherwise, keep lips tight on the mouthpiece to maintain seal for 2 – 3 breaths after the MDI is depressed. Slow down inhalation if you hear the FLOWSignal® Whistle sound. Administer one (1) puff at a time.	Breathe out gently and depress the MDI at the beginning of a slow inhalation. Maintain seal for 5 – 6 breaths after the MDI is depressed. Slow down inhalation if you hear the FLOWSignal® Whistle sound. Administer one (1) puff at a time.	Follow instructions supplied with the MDI on how long to wait before repeating steps 3 – 6 as prescribed.				

CLEANING INSTRUCTIONS FOR MASK AND MOUTHPIECE CHAMBERS

THIS PRODUCT CAN BE USED RIGHT OUT OF THE PACKAGE AND THEN CLEANED WEEKLY.

1		2		3		4	
---	--	---	--	---	--	---	--

Notes:

- Storage and operating range 5° C - 40° C (41° F - 104° F) at 15 to 95% relative humidity.
- Product may need to be replaced after 12 months of use. Environmental conditions, storage and proper cleaning can affect product life span.
- THIS PRODUCT CONTAINS NO LATEX.
- Do not share this medical device.
- Clarity of the chamber is a result of the properties of the StatBan® anti-static material.
- If you notice medication build-up in your chamber, wash the inside of the chamber gently with a soft cloth.
- Dishwashing with overly dirty dishes is not recommended.
- Dishwasher validated up to 158°F (70°C).

CAUTIONS:

- PRODUCT MAY BE PERMANENTLY DAMAGED IF BOILED, STERILIZED OR CLEANED IN A DISHWASHER AT TEMPERATURE ABOVE 158°F (70°C).
- Do not leave the chamber unattended with children.
- Federal (USA) law restricts the sale of this device on or by the order of a physician.

Product Reorder Number:

MOUTHPIECE: 79710/case 10, 79750/case 50

LARGE MASK: 80710/case 10

Rx Only



Small Mask Medium Mask Mouthpiece Large Mask

© 2013 Monaghan Medical Corporation™ and ® are trademarks and registered trademarks of Monaghan Medical Corporation or an affiliate of Monaghan Medical Corporation. This device was Made in the USA from US and Canadian parts.

Manufactured by:




monaghan™

Monaghan Medical Corporation, 5 Latour Ave., Suite 1600, Plattsburgh, NY 12901
www.monaghanmed.com

AeroChamber Plus Z STAT™

Cámara Antiestática de Retención con Válvula

BOQUILLA
MÁSCARA GRANDE

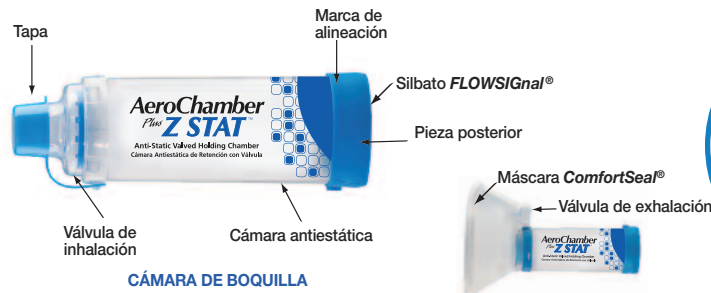

INDICACIONES DE USO

Este producto está diseñado para ser utilizado por pacientes al cuidado o en tratamiento por un médico o un profesional de la salud matriculado. El propósito de este instrumento es utilizarlo para administrar a los pacientes medicamentos desde la mayoría de los Inhaladores presurizados de dosis medidas. Estos instrumentos pueden utilizarse en el hogar, hospitales y clínicas.

INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO PUEDE UTILIZARSE DIRECTAMENTE DESPUÉS DE RETIRADO DEL ENVASE. ANTES DE USARLO, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO ESTAS INSTRUCCIONES, ASÍ COMO LAS QUE ACOMPAÑAN EL INHALADOR DE DOSIS MEDIDAS (MDI).

BOQUILLA

MÁSCARA GRANDE

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>
<p>Revise detenidamente el producto para identificar señales de daño, piezas faltantes u objetos ajenos. Quite los objetos ajenos antes de usar el instrumento. El producto debe reemplazarse INMEDIATAMENTE si tiene piezas dañadas o faltantes. Si es necesario, siga utilizando el inhalador MDI sólo hasta recibir uno de reemplazo. Si los síntomas del paciente empeoran, procure atención médica en forma inmediata.</p>	<p>Quite las tapas del inhalador MDI y la cámara (si corresponde).</p>	<p>Siempre agite el inhalador MDI inmediatamente antes de usarlo, según las instrucciones entregadas con el inhalador.</p>	<p>Introduzca el inhalador MDI en la pieza posterior de la cámara.</p>	<p>Introduzca la boquilla en la boca y cierre los labios a su alrededor para un correcto sellado.</p>	<p>Exhale suavemente y presione el inhalador MDI al comenzar una inhalación lenta. Inhale con suavidad y profundamente por la boca hasta finalizar una respiración completa. Retenga la respiración durante 5 a 10 segundos, si eso es posible. En caso contrario, mantenga los labios apretados contra la boquilla para que estén sellados durante 2 a 3 respiraciones después de presionar el inhalador MDI. Inhale más lentamente si oye el silbido del FLOWSIGNAL®. Administre una (1) descarga de aire por vez.</p>	<p>Respete las instrucciones del inhalador MDI acerca de cuánto tiempo debe esperar para repetir los pasos 3 a 6 como se indica.</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>
<p>Revise detenidamente el producto para identificar señales de daño, piezas faltantes u objetos ajenos. Quite los objetos ajenos antes de usar el instrumento. El producto debe reemplazarse INMEDIATAMENTE si tiene piezas dañadas o faltantes. Si es necesario, siga utilizando el inhalador MDI sólo hasta recibir uno de reemplazo. Si los síntomas del paciente empeoran, procure atención médica en forma inmediata.</p>	<p>Quite las tapas del inhalador MDI y la cámara (si corresponde).</p>	<p>Siempre agite el inhalador MDI inmediatamente antes de usarlo, según las instrucciones entregadas con el inhalador.</p>	<p>Introduzca el inhalador MDI en la pieza posterior de la cámara.</p>	<p>Coloque la máscara en el rostro y asegúrese su correcto sellado.</p>	<p>Exhale suavemente y presione el inhalador MDI al comenzar una inhalación lenta. Mantenga el sellado por 5 a 6 respiraciones después de presionar el inhalador MDI. Inhale más lentamente si oye el silbido del FLOWSIGNAL®. Administre una (1) descarga de aire por vez.</p>	<p>Respete las instrucciones del inhalador MDI acerca de cuánto tiempo debe esperar para repetir los pasos 3 a 6 como se indica.</p>

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LAS CÁMARAS DE LA MÁSCARA Y LA BOQUILLA

ESTE PRODUCTO PUEDE UTILIZARSE DIRECTAMENTE DESPUÉS DE RETIRADO DEL ENVASE Y LUEGO DEBE LIMPIARSE SEMANALMENTE.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Sólo quite la pieza posterior. No manipule la válvula en forma indebida durante la limpieza o desarme el producto más de lo que se recomienda ya que podría dañarse. Para el producto de la máscara, no saque la máscara.</p>	<p>Sumerja las piezas durante 15 minutos en una solución suave de detergente líquido para vajilla y agua limpia tibia. Agite con suavidad.</p> <p>Enjuague las piezas en agua limpia.</p>	<p>Seguro para lavarse en lavaplatos en las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evite ciclos de trabajo pesado u otros ciclos que incluyan secado con calor superior a 70 °C (158 °F) Las piezas deben colocarse UNICAMENTE en la rejilla superior Asegure el producto en la posición hacia arriba, como se ilustra Use detergente para lavaplatos y un producto de enjuague No hierva ni esterilice VEA LA PRECAUCION 1 MÁS ADELANTE. 	<p>Sacuda las piezas para eliminar el exceso de agua y déjelas secar al aire, en posición vertical. Asegúrese de que las piezas estén secas antes de rearmar el conjunto.</p>

Notas:

- Márgenes de almacenamiento y operativos: De 5 a 40 °C (41 a 104 °F) a entre 15 y 95% de humedad relativa.
- El producto tal vez deba ser reemplazado después de doce (12) meses en uso. Las condiciones ambientales, de almacenamiento y la limpieza apropiada pueden repercutir en la duración del producto.
- ESTE PRODUCTO NO CONTIENE LÁTEX.
- No comparta este instrumento médico.
- La transparencia de la cámara es resultado de las propiedades antiestáticas del material StatBan®.
- Si nota una acumulación del medicamento en la cámara, lave el interior de la cámara delicadamente con un paño suave.
- No se recomienda lavar en lavaplatos con vajilla muy sucia.
- Apto para lavar en lavaplatos a temperatura de hasta 70 °C (158 °F).

PRECAUCIONES:

- EL PRODUCTO PODRÍA SUFRIR DAÑOS PERMANENTES SI SE HIERVE, ESTERILIZA O LIMPIA EN UN LAVAPLATOS A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 70 °C (158 °F).
- No deje de supervisar la cámara si hay niños cerca.
- La legislación federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo por parte o a pedido de un médico.

Números para pedidos del producto:

BOQUILLA: 79710/caja 10, 79750/caja 50

MÁSCARA GRANDE: 80710/caja 10

Sólo Rx



Máscara Pequeña Máscara Mediana Boquilla Máscara Grande

© 2013 Monaghan Medical Corporation.™ y ® son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Monaghan Medical Corporation o de una empresa afiliada de Monaghan Medical Corporation. Este dispositivo fue fabricado en EE.UU. con piezas estadounidenses y canadienses.

Distribuido por:



monaghan™

Monaghan Medical Corporation, 5 Latour Ave., Suite 1600, Plattsburgh, NY 12901
www.monaghanmed.com